

Pick-in Master PM-2

多機能・大量処理コロニーピッカー ピッキンマスター Pm-2

新機構! 搬送

高精度化

滅菌性能向上

静音化




全自動釣菌装置（コロニーピッカー）を大幅に改良して発売開始

私共マイクロテック・ニチオンでは、5年前から国内の医科学・分子生物学研究機関向けにコロニーピッカーを本格発売し、国内では国公立の研究機関や民間企業研究所様を中心に多数納入しその機能の充実・性能の高さにたくさんのご支持を頂いております。今秋にはスタッカー搭載最大24枚連続処理タイプ Pm-1m を大幅に改良し Pm-2 multi として2006年11月頃、新発売致します。

新機構採用!・高精度化

新機構としてプレート・ディッシュの搬送機構として「多段スタッカー（おかもち方式）」を採用（詳細次ページ）各種プレートに柔軟対応!

XYZ のロボットモーターが高精度型に変更されコロニーの中心を突く位置精度を高められました。これによって、従来通りの600万画素カラーCCDを用いた高解像度・高精細画像との協調で、ピッキングの性能を向上させました。

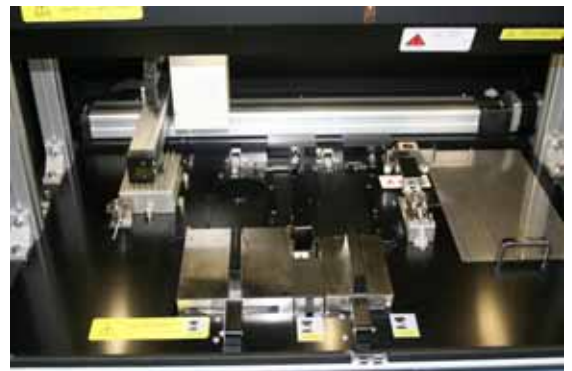


改良された Pm-2 multi の本体

滅菌装置を大幅に改良


従来から有るエタノールブラシ槽、エタノールリンス槽、ヒーター乾熱滅菌の3重滅菌工程を強化。ブラシ行程を見直し「特殊スポンジによる針先のチャッキング(挟み込み)拭き取り」を採用。移植用ニードル針の先端に蓄積して付着する粘性の高いアガーを確実に高く取り除き、クロス・コンタミネーションを低減します。これによって弊社独自の自動針交換システム(オート ニードル チェンジ システム A.N.C.S)との併用で「究極のコンタミ・フリー」を実現が可能です。



ヒーター乾熱滅菌

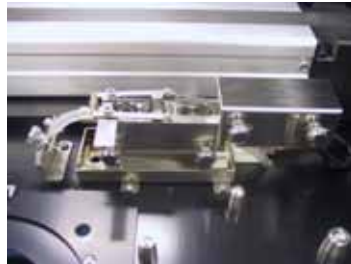


エタノール・リンス・ブラシ槽

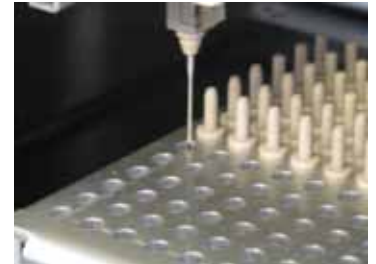


オートニードルチェンジシステム(A.N.C.S)

「多段スタッカー（おかもち方式）」を採用

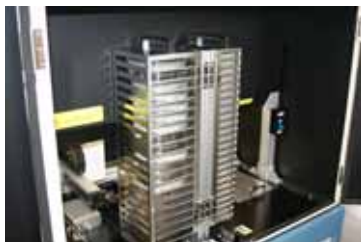

Pm-2 multiの多段スタッカー

新機構としてプレート・ディッシュの搬送機構として「多段スタッカー（おかもち方式）」を採用し、プレート搬送を更に安定化。多種多様なメーカーのプレートにも柔軟に対応します。

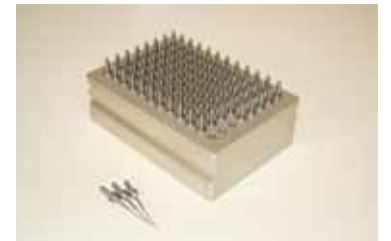


A.N.C.S用ニードルとニードルラック

モーターの変更と共に本体フレームとカバーの構造見直しも実施し、稼働動作音の低減・フレーム剛性の向上と同時に小型のボディサイズも前モデルのスペックをそのまま踏襲しています。大量処理と複雑なリアレイニング作業を迅速に処理できる Pm-2 multi は中規模ラボでのデイリーで行われる単純ルーチン作業から研究者を開放します。

ユーティリティは AC100V のみ

エタノールポンプや負圧空気源など、必要な動力は全て本体に内蔵。海外製の大型機器と比較して圧倒的にコンパクトな本体は設置場所を選びません。培養実験室のスペースを有効に活用できます。

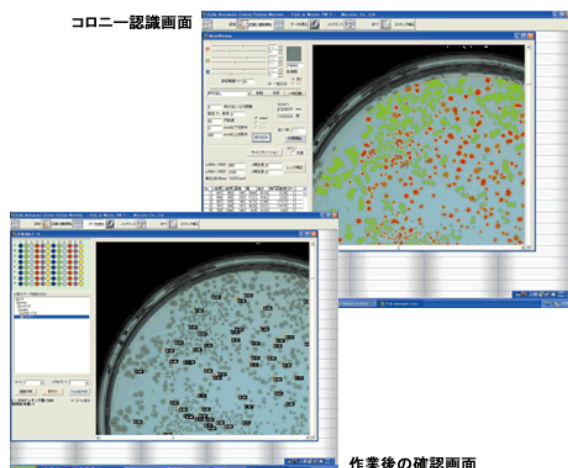

コロニー認識画面

作業後の確認画面

洗練されたソフトウェア

高機能ソフトウェアは常に進化。豊富な納入実績・お客様へのヒヤリングから改良し蓄積された高機能なパラメータ群。PM-1 標準シリーズの高機能ソフトウェアを全てそのまま引き継いでいます。

さまざまなアプリケーション

コロニーピッカーPm-2シリーズは、10 Colony ~ 5000 Colony / Day の大腸菌やサルモネラ菌などの培養コロニーのピッキングだけでなく、さまざまな対象菌群に対応可能です。また、電気泳動ゲルのバンドのスポッティングや、細胞のピッキングなどへのカスタム対応でも実績があります。

Colony




大腸菌、酵母、ファージ
ブランク・・・

Gel

1次元 Gel、2次元 Gel

Cell

動物細胞、植物細胞
種子・・・

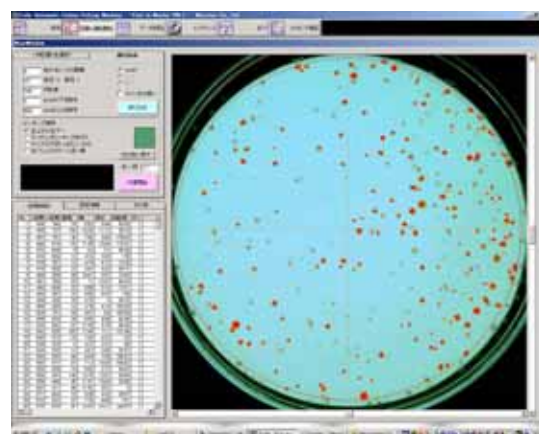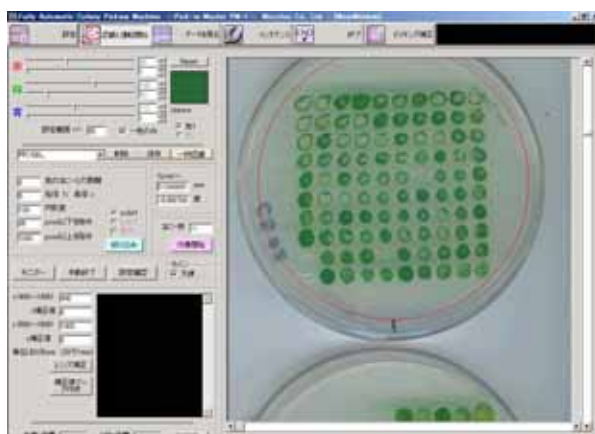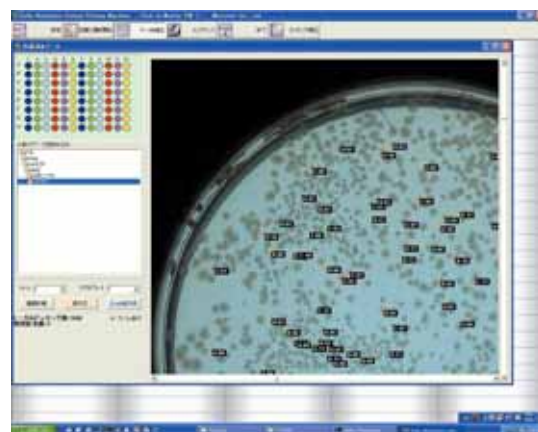


特注事例

マイクロプレート・リアレイヤー
96 Well マイクロプレートから96 Well、384 Well、ディープ Well など、さまざまなプレートへ移植を行う専用機です。エクセルを使った複雑な並べ替えなどをヒューマンエラー無しで行えます。



マイクロプレート・リアレイヤーPm-1SR

ゲルピッカー
1D や2D の電気泳動 Gel のバンド・スポットを自動認識し、スポットをカットして96 Wellへ自動アレイ出来ます。UV ~ 可視光の励起光源で各種対応。

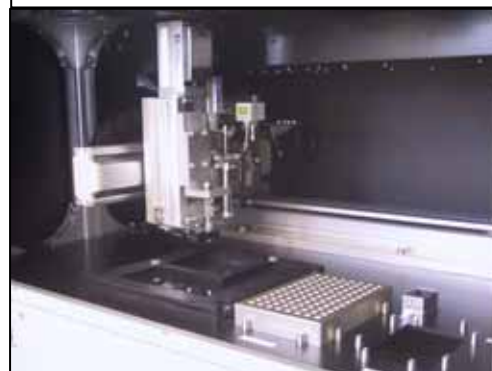

ゲル・ピッカー Gm-1

製 品 仕 様		
P M 2 スタッカータイプ 本体型式：PM - 2 multi		
標 準 仕 様		
画像認識	認識方式	カラー CCD(電化結合素子)撮像方式
	認識精度	600 万画素 RGB カラー CCD 画素分解能 0.04mm/ピクセル
	認識設定パラメータ	RGB 抽出設定、隣接距離設定、短径長径比率設定、円形度設定、最大ピクセル数設定、最小ピクセル数設定、認識領域設定、その他(1)
駆動	駆動方式	3 軸(5 相ステッピングモーター × 3)アクチュエーター方式
	位置精度	アクチュエーター位置決め精度 ± 0.02mm
	最小認識コニサイズ	0.2mm (実際の寸法は条件により異なる)
	最大処理速度	5.5 sec / pick (滅菌洗浄工程を含まず)
	動作設定パラメータ	針交換設定、ピッキング回数設定、マイクロプレート移植設定、コードピンの洗浄設定、コードピン差込深さ設定、その他(1)
シャーレプレート	移植元使用可能シャーレ	90mm、150mm ディスポーザブルシャーレ
	移植先使用可能プレート	(シャーレ) : 96well, 384well (ティーパー) : 96well
コードピン	釣菌動作	1 ポイント / 1 Pick / 動作
	材質と仕様	SUS304 PM-1S 専用コードピン
	交換方式と格納本数	A.N.C.S(Auto Needle Change System) 全自動交換法、コードピン専用トレイに最大 96 本を格納し自動交換が可能
	ピン滅菌	3 重滅菌コンプレッション (自動供給式エタノール槽、自動供給エタノール槽、高温(400℃)ヒーター槽)
制御方式	画像解析及び統合制御	パーソナルコンピュータを使用 OS : WindowsXP
	駆動制御	自社製ドライバボードを本体に内蔵
機能	その他	紫外線殺菌ランプ(蛍光灯 × 3 灯)(自動パワーオフタイマー付き)
		内臓エタノール供給ポンプ
		エタノール供給残液警告センサー、同液漏れ警告センサー、前面扉開閉センサー(インターロック機能付き)
外形寸法	(W) × (D) × (H)	(W)925mm × (D)780mm × (H)1550mm (突起部含まず)
本体重量	乾燥重量	75K g (制御用パソコンは含まない)
供給電源	(日本国内仕様)	AC100V 5 A (50/60Hz) (制御用パソコンは含まない)
付属品	本体付属品	コードピン × 24 本、コードピンストッカー × 1、エタノール供給用バリエックスガラスボトル(1000ml) × 1、同排出用バリエックスガラスボトル(1000ml) × 1、本体取扱説明書(和文) × 1
	パーソナルコンピュータ(2)	Windows 本体 × 1、TFT 液晶モニター(19 インチ SXGA) × 1、キーボード × 1、USB マウス × 1 RS-232C ケーブル(2 m) × 1、USB ケーブル(2 m) × 1、モニターケーブル × 1、電源ケーブル(本体用、パーソナルコンピュータ用、モニター用各 1 本) × 1、取扱説明書(英文) × 1

1 ソフトウェアの機能詳細はお問合せ下さい。

2 使用するパソコンの仕様は時期によって変動致します。

< 注意 > 品質改良の為、上記の仕様は予告無く変更される場合がございます。

その他ご不明な点は下記までお問合せ下さい。

(製造・販売)



株式会社 マイクロテック・ニチオン

〒274-0074 千葉県船橋市滝台2丁目16番5号
 TEL.047(466)8186 FAX.047(466)8190
 URL: <http://nition.com/>
 E-mail: microtec@nition.com